

# 検査用陰圧ブース「MC-BOX」



患者を陰圧隔離したまま、  
「ワンマン」で検体採取やワクチン接種を行えます。



ワクチン接種





PCR検査




発熱外来

# 患者を陰圧隔離するので、 小スペースでも運用ができます。

レブセル独自のパスボックスは、ブース内上部が開くので、  
ワンマンでブース内との検体等の出し入れや  
ワクチン接種が行えます。

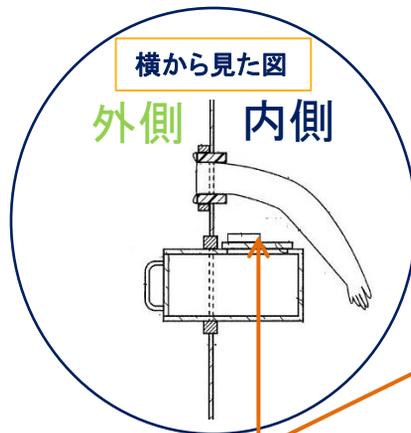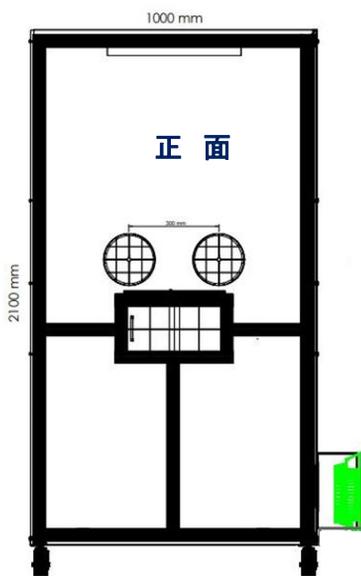

ブース内のパスボックスは、  
天面部に設けられた蓋が開閉で  
きるので、外側の腕部挿入口か  
ら挿入した手で、検体等の出し入  
れができます。 \*特許取得済

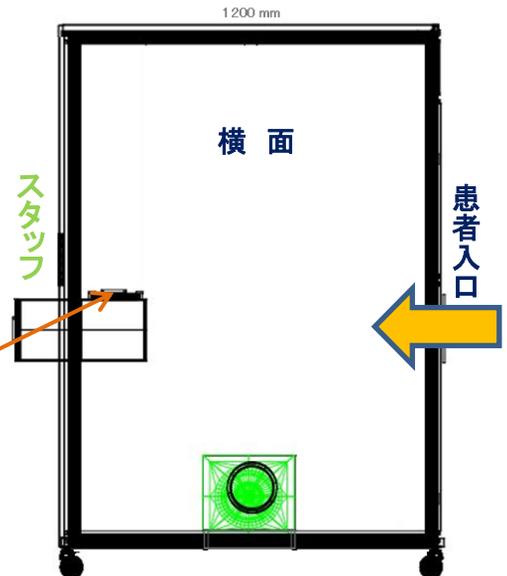

製品名	検査用陰圧「MC-BOX」
テントサイズ	W1000×D1200×H2100mm
集塵効率	0.3 μmの粒子にて99.99%以上
フィルター	HEPAフィルター
処理風量	3m <sup>3</sup>
換気回数	70回以上/時間*ブース内
圧差	2.5Pa以上*テント内外
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	40W/40W

販売店